

## 药瓶适配器

### 实现无针药液转移和复溶


药瓶适配器是实现药液在药瓶与注射器之间安全、快捷的转移和配制的高效解决方案。药瓶适配器穿刺技术为药物和稀释剂的吸取提供了重复性高的设计深度，极大地减少了使用传统针式抽吸方法的终端用户可变因素。这意味着，可确保最有效和具成本效益的药品过量灌装量。

#### 药瓶适配器

- 降低针刺损伤的可能性
- 更少的步骤、部件和尖锐部分
- 降低高成本的过量灌装的需求

#### 选项

- 硅化穿刺部件可降低插入力
- 内置流体过滤器可减少颗粒物转移

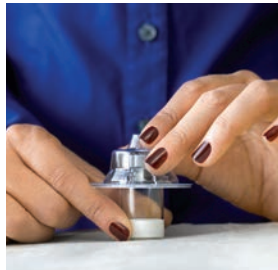

#### 通气式药瓶适配器

- 双通道穿刺部件有助于快速吸取大量药液且不对药瓶加压
- 压力均衡，可降低有毒物料回喷可能性
- 该设计确保流入的空气无菌和适当的进气
- PTFE 0.2µm疏水性空气过滤器



#### 可擦拭式药瓶适配器

- 带有鲁尔兼容接头的硅橡胶阀可保持药瓶多次使用的无菌性
- 消除多次给药胶塞相关的针孔落屑和胶塞密封完整性问题
- 仅在连接至或通过标准鲁尔滑锁接口或鲁尔旋锁接口注射器压缩时开启
- 可擦拭表面，确保无菌

药瓶适配器是通过美国食品药品监督管理局510(k)认证的器械，并印有CE标识

如需获得更多信息，请访问 [www.westpharma.com/zh-CN](http://www.westpharma.com/zh-CN)

北美 1-800-345-9800 option 8 | 南美 +55 11 4055 6061 | 欧洲 +49 (0) 2403-7960 | 中国 +86 021 3165 1828

西氏制药服务有限公司 530 Herman O. West Drive | Exton, PA 19341